



ASPIVENIN

- **Niezbędny komponent apteczki pierwszej pomocy.**
- **Do samodzielnego i wielokrotnego stosowania w miejscach ukąszenia.**



ASPIVENIN® produkcji francuskiej firmy **ASPIR®** jest to miniaturowa pompka ssąca wytwarzająca w miejscu zastosowania podciśnienie około 0,75Atm i dzięki temu bezboleśnie i bezinwazyjnie usuwa wszelkie jady i toksyny.

Niezależnie od podstawowej funkcji odsysania toksyn **ASPIVENIN®** wywołuje jeszcze dodatkowy efekt. Wytworzone bowiem podciśnienie wstrzymuje krążenie krwi w lokalnej sieci naczyń włosowatych i tym samym zapobiega dalszemu rozprzestrzenianiu się toksyn w organizmie. Urządzenie to więc spełnia funkcję opaski uciskowej, aczkolwiek nie wywołuje negatywnych skutków związanych z jej długotrwałym stosowaniem w trakcie oczekiwania na pomoc medyczną w poważniejszych przypadkach.

ASPIVENIN® powinien być w każdej podręcznej apteczce nie tylko ratownika czy leśnika, ale turysty lub działkowicza. Jest wyjątkowo prosty w użyciu, nie wymaga żadnego przygotowania ani sterylizacji. Można go swobodnie stosować przez kilka lat.

Stwierdzono również przydatność **ASPIVENINU®** w gabinetach chirurgicznych i kosmetycznych (usuwanie kolców, drzazg, oczyszczanie drobnych wykwitów ropnych na skórze).



ASPIVENIN® (w USA nazwa handlowa **EXTRACTOR®**) nie ma żadnego odpowiednika na rynku.

• Jednominutowe użycie może zapobiec groźnym skutkom ukąszeń przez:

- | | |
|--------------|------------------|
| • szerszenie | • gzy |
| • osy | • mrówki |
| • pszczoły | • meszki |
| • komary | • pająki rodzime |

• Dwuminutowe użycie odsysa **kleszcze** w całości.

• Trzyminutowe zapobiega skutkom ukąszeń

- żmij
- pająków (np. czarna wdowa, tarantula)
- jadowitych ryb (np. ogończa, ostrosz)
- skorpionów



ASPIVENIN®, zastosowany w krótkim czasie w miejscu ugryzienia, powstrzymuje możliwość przenikania substancji toksycznej do wnętrza organizmu i wysysając te substancje jednocześnie usuwa ból. W praktyce w lżejszych przypadkach pozostaje najwyżej lekkie przekrwienie w miejscu zastosowania, natomiast żadne negatywne objawy związane z ukąszeniem nie występują.

Międzynarodowe badania, certyfikaty i referencje

Urządzenie zostało przebadane i uzyskało bardzo pozytywne oceny od kilkunastu wiodących instytutów naukowych na świecie m.in. od **Instytutu Pasteura w Paryżu** oraz **Centrum Trucizn Gór Skalistych przy Uniwersytecie Colorado w Denver**. Posiada certyfikat TÜV. Za jedyne skuteczne urządzenie tego typu uznały **ASPIVENIN®** najbardziej prestiżowe wydawnictwa medyczne na świecie m. in. **Merck's Manual, Conn's Therapy, Poisondex, Encyclopaedia Britannica**, a powszechne stosowanie zaleciły Amerykański Czerwony Krzyż oraz Zarząd Lasami i Zasobami Naturalnymi (USA).


ASPIVENIN® uzyskał wiele nagród i wyróżnień m. in.:

- Złoty Medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Nowych Technologii w Genewie
- Srebrny Medal na Międzynarodowej Wystawie w Wiedniu
- Złoty Medal w Konkursie Lepiné w Paryżu
- Złoty Medal oraz Nagrodę Prezesa Rady Ministrów Belgii na Światowej Wystawie Wynalazków w Brukseli.

ASPIVENIN® stał się powszechnie używanym urządzeniem do pomocy doraźnej na wszystkich kontynentach. Już ponad **4 miliony** osób na świecie go stosuje. O jego przydatności niewątpliwie świadczy fakt, że w toku badań klinicznych w Rio Morona w Amazonii w okresie od lutego do października 1994r. zastosowano go w 301 przypadkach ukąszeń m. in. skorpionów, tropikalnych pajaków, żmij i węży. Skuteczność dobrą albo bardzo dobrą stwierdzono w 97% przypadków.

Badania, atesty i rekomendacje polskie

ASPIVENIN® został przebadany przez Instytut Leków w Warszawie (Protokół Analizy Nr 941/K-3918/MM) i uzyskał dopuszczenie do Obrotu (Świadectwo Dopuszczenia do Obrotu Nr IL-4968/MM). Przeprowadzono również merytoryczne badania skuteczności **ASPIVENIN®**. Kierownik Kliniki Obserwacyjno-Zakaźnej Akademii Medycznej w Białymstoku- jednostki naukowej wiodącej w kraju w zakresie chorób odkleszczowych- prof. zw. dr hab. med. Danuta Prokopowicz dokonała badań urządzenia pod względem jego skuteczności w zapobieganiu chorobom odkleszczowym u ludzi (borelioza, odkleszczowe zapalenie mózgu) oraz w zwalczaniu skutków ukąszeń owadów błonkoskrzydłych (os, pszczoły) **u alergików**. Wyniki badań potwierdzają, że **ASPIVENIN®** jest pierwszym na polskim rynku sprzętem służącym do udzielania skutecznej pomocy doraźnej w razie wniknięcia kleszcza (łatwy sposób usunięcia kleszcza oraz jego jadu), a także stwarza możliwości efektywnego usunięcia z organizmu jadu pszczoły, co- zgodnie z obserwacjami **pozbawia reakcji alergicznych u uczulonych osób**.

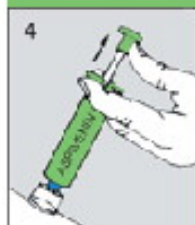

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Delikatnie przymocować do urządzenia **ASPIVENIN®** końcówkę najbardziej odpowiednią do miejsca ukąszenia i całkowicie wysunąć tłok.
2. Trzymając **ASPIVENIN®** jedną ręką przyłożyć końcówkę do skóry w miejscu zranienia.
3. Wcisnąć tłok do oporu nie zwalniając nacisku kciuka przed zatrzymaniem się tłoka. Spowoduje to przyssanie się. Następnie pozostawić pompkę **ASPIVENIN®** na 60 do 90 sekund w przypadku ukąszenia owada a do 3 minut, z możliwością powtórzenia w przypadku ukąszenia węża.
4. Po użyciu, w celu usunięcia **ASPIVENIN®**, unieść tłok końcem kciuka. Przenieść ranę środkiem odkażającym.

Czyszczenie:

Wyłącznie końcówki, wodą z mydłem.

Przeciwwskazania:

Powiększ, zewnętrzne narządy płciowe.